



Hémostase avec Tourniquet

(IBG S san, Leçon 4)

Buts d'instruction

- Citer par cœur quand la pose du tourniquet est indiquée.
- Préparer le tourniquet à l'engagement, seul et selon le règl.
- Poser correctement le tourniquet aux bras et aux jambes, à soi-même et au patient.





Hémostase avec Tourniquet

(IBG S san, Leçon 4)

Indications pour la pose du tourniquet

- Saignement incoercible d'une ou des extrémités.
- Plusieurs blessures saignant abondamment sur la même extrémité.
- Amputation d'une ou des extrémités.
- Saignement non localisé d'une ou des extrémités.





Hémostase avec Tourniquet

(IBG S san, Leçon 4)

Prescriptions de sécurité

- Le tourniquet peut être posé sur le patient fictif avec la tige fermée pendant maximum 1 minute à des fins de formation et d'exercice.
- Pour les patients fictifs qui prennent des médicaments anticoagulants, il est strictement interdit de serrer le tourniquet.

Risques liés à une mauvaise utilisation du tourniquet

- Paralysies nerveuses.
- Formation de caillots de sang dans les vaisseaux sanguins.
- Syndrome des loges avec destruction des muscles touchés.
- Destruction des cellules musculaires avec défaillance consécutive des reins en raison de l'obstruction des tubules rénales.
- Stase veineuse avec syndrome des loges si le tourniquet n'est pas assez serré.



Hémostase avec Tourniquet

(IBG S san, Leçon 4)

Prescriptions d'application


- Le tourniquet doit être posé en premier lieu au plus proche du tronc (high and tight).
- Le tourniquet sera posé directement sur la peau, au minimum d'une largeur de main de distance de la plaie, si la localisation est possible.
- Le tourniquet ne peut pas être posé sur les articulations, des poches ou des corps étrangers.
- Le tourniquet doit être appliqué fermement, avant de fermer la tige (pre-tightening).
- Poser le tourniquet horizontalement par rapport au membre.
- L'heure de pose de tourniquet doit être notée (sur le front du patient, sur la bande de sécurité, sur la feuille de patient).
- Le tourniquet ne sera pas ouvert jusqu'à la prise en charge du patient par le personnel spécialisé.



Hémostase avec Tourniquet

(IBG S san, Leçon 4)

Les éléments du tourniquet

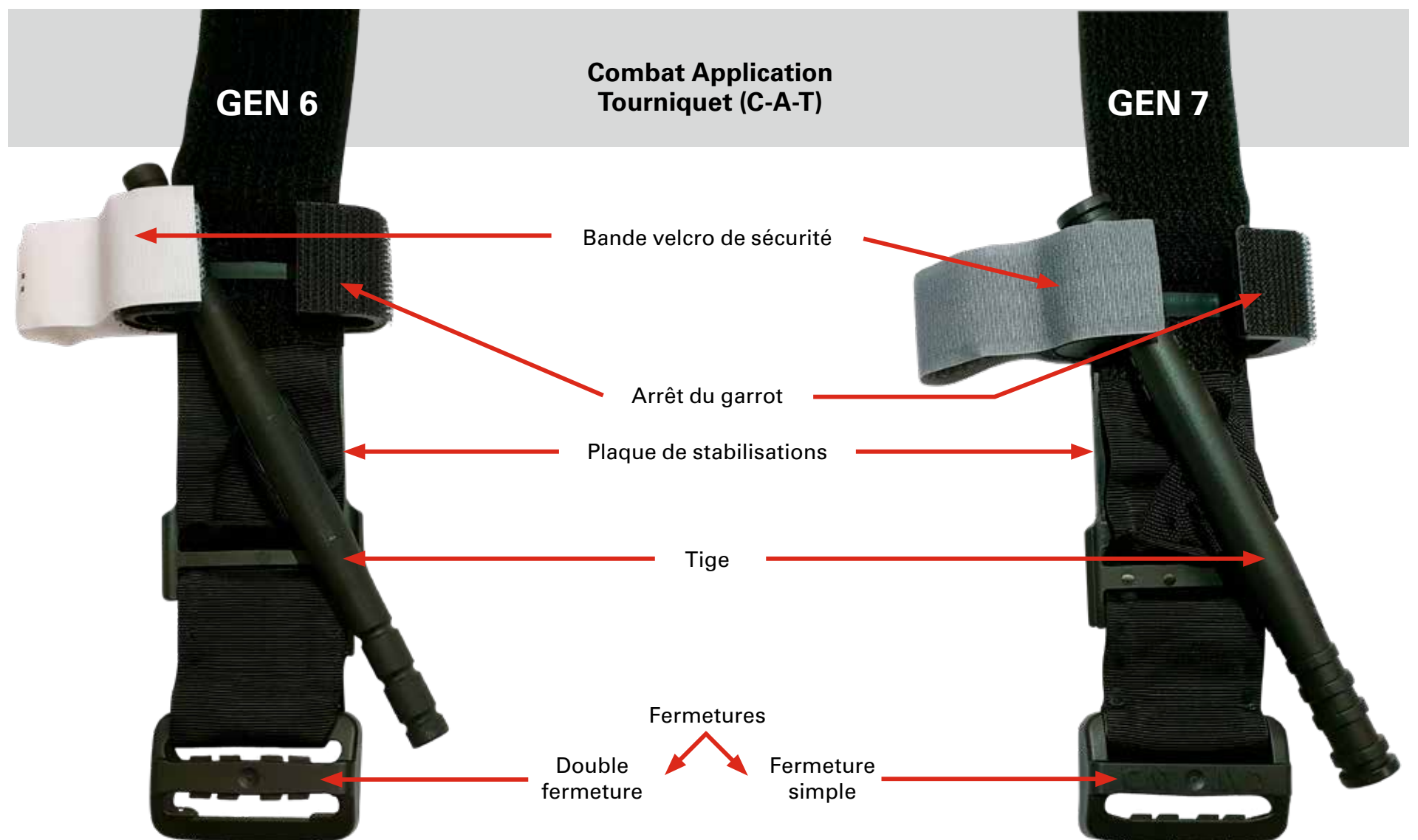



Hémostase avec Tourniquet

(IBG S san, Leçon 4)

Utilisation Tourniquet sur le bras et la jambe

Tourniquet génération 6

Fermeture avec double fermeture

Bande velcro de sécurité blanche

Bras avec fermeture simple



Jambe avec double fermeture

Tourniquet génération 7

Fermeture avec fermeture simple

Bande velcro de sécurité grise

Bras et jambe uniquement avec fermeture simple





Hémostase avec Tourniquet

(IBG S san, Leçon 4)

Préparation à l'engagement 1/2

Après chaque usage pour des raisons d'exercice, la disposition d'engagement doit être produite.



Etape 1

Libérer la tige de l'arrêtoir et tendre la bande



Etape 2

Tourniquet de la génération 5 et 6

Passer env 15 cm de la bande auto-adhérente par la boucle intérieure de fermeture.

Tourniquet de la génération 7

Passer env 15 cm de la bande auto-adhérente par la boucle de fermeture.



Etape 3

Plier la bande et la presser sur le velcro.



Hémostase avec Tourniquet

(IBG S san, Leçon 4)

Préparation à l'engagement 1/2



Etape 4

Plier le tourniquet en deux.



Etape 5

Fixer la tige du garrot et la bande velcro de sécurité selon l'images.

Le tourniquet est placé en règle générale dans la poche de jambe gauche des pantalons de combat ou fixé sur le harnais.

Obligatoire: la prise et l'engagement du tourniquet doit pouvoir se faire avec une seule main.

Le soldat blessé doit pouvoir se poser le tourniquet lui-même.